

Lumbalna Regija

MD-LUMBAR

SEKUNDARNE TOČKE

1

Anatomski orijentir:

- A) Na ilijačnom grebenu, 8-10 cm od stražnje srednje linije

MDs:

MD-Muscle + MD-Tissue.

Kako ubrizgati:


i.m.u dubinu od 8-10mm

- B) Na sredini musculus gluteus maximus na istoj liniji s točkom 1A (vidi gore)

MD: MD-IschiaL

Kako ubrizgati:

i.m.u dubinu od 2,5-3cm

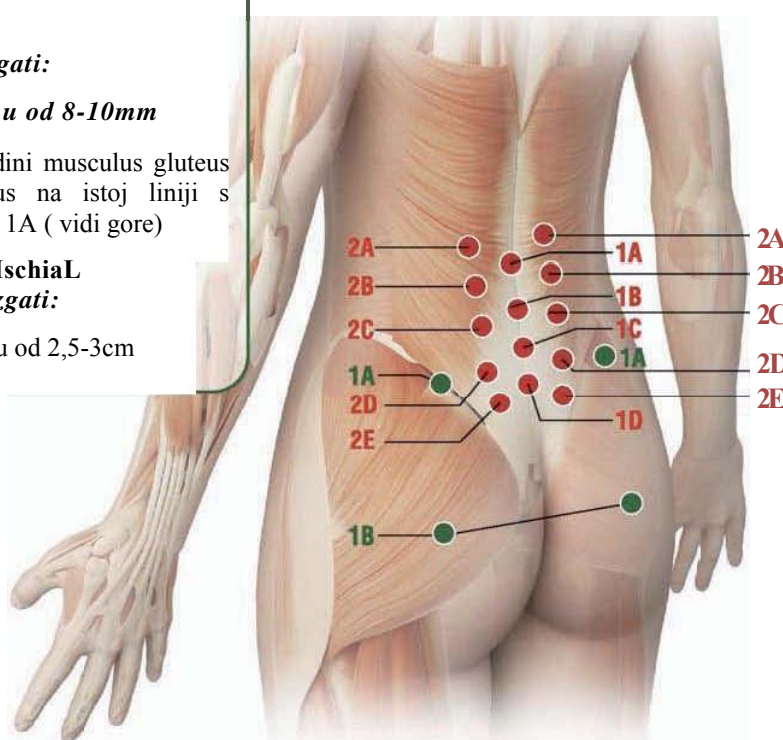

GLAVNE TOČKE

1

Anatomski orijentir:

Od vrha:

- A) ispod šiljastog nastavka L2
B) ispod šiljastog nastavka L3
C) ispod šiljastog nastavka L4
D) ispod šiljastog nastavka L5

Kako injicirati: i.d. ili s.c.

2

Anatomski orijentir:

Od vrha:

- A) 5-6 cm lateralno u prostor između šiljastog nastavka L1 i L2.
B) 5-6 cm lateralno u prostor između šiljastog nastavka L2 i L3
C) 5-6 cm lateralno u prostor između šiljastog nastavka L3 i L4
D) 5-6 cm lateralno u prostor između šiljastog nastavka L4 i L5
E) 3-4 cm lateralno u prostor između šiljastog nastavka L5 i S1

Kako ubrizgati:

i.m.u dubinu od 10 – 12 mm.

Napomena:

Sve potkožne (s.c.) i intradermalne (i.d.) injekcije moraju biti s iglom dužine 12-16 mm, promjera 25-28 G (Gauge).

Sve intramuskularne (i.m.) injekcije moraju biti s iglom od dužine 40 mm, promjera 21 G (Gauge).

- Kada dajete subkutane injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 45° stupnjeva
- Kada dajete injekcije intradermalno, umetnite iglu pod kutem od oko 30° stupnjeva
- Kada dajete intramuskularne injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 90° stupnjeva

Lumbalna Regija– MD - LUMBAR

UPUTE ZA UPORABU I KOMBINACIJE S DRUGIM MD

- Ubrizgajte u **glavne točke**

- Lumbalna bol izazvana degenerativnim bolestima lumbalne kralježnice (lumbalna i lumbosakralna artroza) **MD-Lumbar + MD-Muscle + MD-Neural**
- Lumbalni osteofiti **MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Matrix**
- Bol u križima zbog mišićno tetivnih žarišnih točki **MD-Lumbar + MD-Muscle**
- Posturalna bol u u križima **MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Muscle + MD-Tissue**
- Lumbalni i lumbosakralni mehanički disbalans **MD-Lumbar + MD-Neural**
- Lumbalni i lumbosakralni sindrom **ligamenta MD-Lumbar + MD-Matrix**
- Sakroilijakalni sindrom **MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Matrix**
- Lumbalna i lumbosakralna radikulopatija **MD-Lumbar + MD-Neural + MD-Ischial**